

Свързване-Е

Инструкции за употреба

ВАЖЕН

Прочетете този документ "Инструкции за употреба" преди работа. Този продукт е предназначен само за употреба от дентални специалисти.

СПЕЦИАЛНО ФОРМУЛИРАН ЗА УПОТРЕБА В СТОМАТОЛОГИЯТА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Сопнест-Е е еднокомпонентно едноетапно лепило за леко втвърдяване от 5-то поколение на базата на ацетон и смоли НЕМА и Bis-GMA. Подходящ е за използване с техника на мокро свързване. Необходимо е ецване на повърхностите.

Име на продукта	Свързване-Е
Име на фирмата	Перфекшън Плюс ООД
Адрес на компанията	6 Westwood Court, Brunel Road, Тотън, Хемпшир, SO40 3WX, Великобритания
Фирмен телефонен номер	+44 (0) 2380 866 677

КОД НА ПРОДУКТ REF

PP010/1029 Сопнест-Е бутилка 5 ml, 5 микро накрайника за апликатор и чиния Darpens за еднократна употреба.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Сопнест-Е се използва за свързване на дентин и емайл с възстановителни материали - композити, композити, обработени метали, амалгами и керамика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не използвайте, ако пациентът е алергичен към продукта или към някоя от съставките. Да не се използва върху открита целулоза.

Взаимодействие с други вещества: Сопнест-Е не трябва да се използва с продукти, съдържащи евгенол.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


БЕЛЕЖКА! Не използвайте, ако основният пакет е счупен. Препоръчително е да използвате зъбна кофердам по време на нанасяне на продукта.

- Подгответе кухнята както обикновено. Препоръчва се почистване с безмаслена лечебна паста Perfection Plus. За дълбоки кухни използвайте облицовка от калциев хидроксид, като PerfectaLINE или цимент на основата на стъклойономер.
- Нанесете слой ецване върху цялата повърхност, която ще се ецва. Оставете ецва на място за 15 секунди (дентин), 30 секунди (емайл). Изплакнете с вода и подсушете с въздух. Избягвайте прекомерно изсушаване на дентина. След изсъхване повърхността трябва да е тебеширена и да не е замърсена преди нанасяне на свързващата смола. Ако повърхността се замърси със слюнка, изплакнете и подсушете отново и гравирайте отново, ако е необходимо.
- Разклащайте бутилката преди всяка употреба.
- Деликатно стиснете бутилката и нанесете малко количество лепило в чашата. Не насилвайте бутилката.
- С помощта на напълно наситен микроапликатор нанесете 2-3 слоя лепило върху гравирана повърхност.
- Изсушете с въздух за 10-20 секунди, за да изсушите целия разтворител от повърхността. Ако повърхността не е лъскава, нанесете допълнителни слоеве лепило и подсушете.
- Леко втвърдяване за 20 секунди. Използвайте всяка полимеризационна лампа с интензитет на светлината $\geq 700W/cm^2$ и диапазон на дължината на вълната 400-500nm (синя светлина).
- Нанесете слой от леко втвърдяващ се възстановителен материал в кухнята и завършете възстановяването.

БЕЛЕЖКА! След като желаното количество лепило се екструдира, веднага затворете бутилката.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте контейнера плътно затворен на сухо, добре проветриво място между 4-28°C. Пазете от пряка слънчева светлина и източници на топлина. Не замразявайте продукта. Изхвърлете съдържанието/контейнера, както се изисква от националните регулаторни изисквания. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

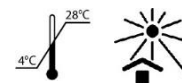

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Сопнест-Е е лесно запалима течност.



Предупреждения за опасност и предпазни мерки:

Невтвърденият продукт причинява кожа, сериозно дразнене на очите, може да причини дразнене на дихателните пътища.

• АКО Е ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. Ако се появи дразнене на кожата: Потърсете медицинска помощ/помощ. Свалете замърсените дрехи и ги измийте преди повторна употреба.

• ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ/помощ.

- ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете жертвата на чист въздух и дръжте в покой в удобно за дишане положение. Обадете се на ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР или на лекар/лекар, ако се почувствате зле.

Предотвратяване:

Избягвайте да дишате пари. Измийте добре ръцете след работа. Използвайте само в добре проветриво помещение. Носете защитни ръкавици / защитно облекло / предпазни очила / предпазни средства за лице.

Предпазливост



Ако възникне сериозен инцидент във връзка с продукта, той трябва да бъде докладван на производителя и компетентния орган.

Партиден код/Дата на изтичане

Вижте опаковката за партидата и срока на годност. Да не се използва след изтичане на срока на годност. Моля, цитирайте този партиден номер в цялата кореспонденция.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

