

## Latex gát Használati utasítás

### **FONTOS**

Kezelés előtt olvassa el ezt a "Használati utasítás" dokumentumot. Ezt a terméket csak szakember használhatja.  
**KIFEJEZETTEN FOGÁSZATBAN VALÓ HASZNÁLATRA KIFEJLESZTETT**

### **AZONOSÍTÁS**

Termék neve	Latex-gát 6 x 6 képpont 36
Cégnév	Perfection Plus Kft.
Cég címe	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Egyesült Királyság
Cég telefonszáma	+44 (0) 2380 866 677

### **TERMÉKKÓD - REF**

004/0032 Latex gát 6 x 6 vékony zöld pk 36  
004/0033 Latexgát 6 x 6 Közepes zöld pk 36  
004/0034 Latexgát 6 x 6 Nehéz zöld pk 36

### **HASZNÁLATI JELZÉSEK**

A latex gumi gátak természetes gumi latexből készülnek. A fogászati gátat védő szájvédőként használják az endodonciai eljárások során a fertőzés kockázatának csökkentése, a munkaterület elkülönítése, a részecskék vagy apró tárgyak bejutásának megakadályozása érdekében a beteg légutakba és a beteg kényelmének javítása érdekében. A fogászati gát egy egyszer használatos, nem invazív, nem steril eszköz, amelyet csak szakképzett fogászati szakemberek használhatnak a leírt célra.

### **ELLENJAVALLATOK**

A fogorvos felelőssége annak meghatározása, hogy a fogászati gát használata megfelelő-e minden egyes beteg számára. A latex fogászati gátakat nem szabad olyan helyzetekben használni, amikor az adott területen a bőr sérült, a betegnek ismert latexallergiája vagy IV. típusú allergénekkal szembeni érzékenysége van, vagy egyéb klinikai megfontolások arra utalnak, hogy nem szabad használni.

### **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

1. Vegyünk egy lapot latex gátból és egy gumi gát sablonból.
2. Helyezze a latex gátat a sablon tetejére és állítsa be.
3. Jelölő toll segítségével válassza ki, hogy melyik fog szükséges az elkülönítéshez.
4. Készítsen lyukat a Perfection Plus fogászati gátlyukasztójával.
5. Nyújtsa ki a latexgátat egy fém gátkeretre.
6. Helyezze a fogászati gát bilincset a lyukba és helyezze a fog körül.

A fogászati gát lyukasztójának jó állapotban kell lennie, mivel a tiszta lyuk lyukasztásának elmulasztása a fogászati gát szakadását eredményezheti.


### **RAKTÁROZÁS**

A termék gyúlékony, és a kezelés és tárolás során távol kell tartani a nyílt lángtól. 26°C alatt, közvetlen hőforrásoktól távol tárolandó.

Kerülje a nedves tárolási körülményeket, és tartsa távol a közvetlen napfénytől.

Kerülje a rézzel, réztartalmú ötvözetekkel, olajokkal, oldószerekkel és zsírokkal való érintkezést.

A dobozt használaton kívül le kell zárni.

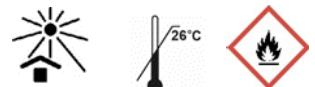

### **FIGYELMEZTETÉS!**

A természetes gumi latex fogászati gátak nem használhatók olyan személyeknél, akik hajlamosak a természetes gumi latex allergiára, de egyébként nem veszélyesek és biztonságosak.

A termék feldolgozási adalékanyagokat tartalmaz, beleértve a ditiokarbonátot, amely bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat, és IV. típusú allergiát okozhat. Azok a személyek, akik tudják, hogy érzékenyek a ditiokarbonátokra, kerüljék a termékkel való érintkezést.



A termék nem tekinthető veszélyesnek a terméken lévő mennyiségben, de kerülni kell a sérült bőrrel való érintkezést.

A terméket csak szakképzett fogorvos használhatja, aki képzett a fogászati gátak használatában.

- Ne használja a fogászati gátbetétet, ha sérülés jelei vannak. Kérjük, a sérült tárgyakat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa
- Ne használja a fogászati gát terméket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célra.
- A terméket csak a dobozon feltüntetett lejáratidő előtt szabad felhasználni.
- Ne használja a terméket gyermekeken, kivéve, ha szakképzett szakember felügyelete alatt áll.
- Ez a termék csak egyszeri használatra szolgál. Nem alkalmas tisztításra

#### Figyelmeztet



A termékkel kapcsolatos súlyos váratlan események bekövetkezését jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak.

#### TÉTELSZÁM ÉS LEJÁRATI IDŐ

A fentieket minden csomagra nyomtatják, és minden olyan levelezésben fel kell tüntetni, amely a termék azonosítását igényli. Ezen időpont után ne használja a terméket. A tételt lásd a termék dobozában.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
[www.perfectionplus.com](http://www.perfectionplus.com)



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
[Regulatory@perfectionplus.com](mailto:Regulatory@perfectionplus.com)



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

