

ProphyPLUS Single Dose Használati utasítás

FONTOS

Kezelés előtt olvassa el ezt a "Használati utasítás" dokumentumot. Ezt a terméket csak fogorvosok használhatják.
KIFEJEZETTEN FOGÁSZATBAN VALÓ HASZNÁLATRA KIFEJLESZTETT

AZONOSÍTÁS

Product Name	ProphyPLUS Egyadagos Prophy Paste pk 200 csésze
Company Name	Perfection Plus Ltd
Company Address	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Company Phone No.	+44 (0) 2380 866 677

TERMÉKKÓD -

PP010/0100 Közepes menta
PP010/0101 Durva menta
PP010/0102 Közepes cseresznye
PP010/0103 Durva cseresznye
PP010/0104 Funky ízek 200 matricával

HASZNÁLATI JELZÉSEK

Polírozó és tisztítószeres keveréke, amelyet professzionális használatra terveztek fogászati/fogszabályozási higiéniai eljárások során. Minden adagegységnyi pohár elegendő pasztát tartalmaz egyetlen profilaxis kezeléshez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Profilizáló csésze feltöltésével nyomja be a csésze felületét a pasztába, miközben alacsony sebességgel fut. Gyors és könnyű érintés. A fogfelület túlmelegedésének elkerülése érdekében elegendő pasztát kell tartani a csészén. A nyál evakuálása ajánlott a paszta hígításának és lenyelésének elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS!

A pasztát ki kell üríteni és nem szabad lenyelni.
A termék 1,23% nátrium-fluoridot tartalmaz, hacsak nincs jelezve, hányinger a fluorid túlzott lenyeléséből eredhet. Gyermekektől elzárva tartandó.

Figyelmeztet



Amennyiben a termékkel kapcsolatban súlyos váratlan esemény következik be, azt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak.

RAKTÁROZÁS


Tárolja hűvös, száraz helyen, 25°C alatt. Közvetlen napfénytől védve tartandó.



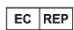
Tételkód/lejárató idő

Lásd a potot a tételszámhoz és a lejárató dátumhoz.

Forgalmazza: Perfection Plus Ltd, 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX

 Dental Technologies
6901 North Hamlin
Avenue
Lincolnwood
Illinois 60712, USA
www.dentaltech.com

 Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road, Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com
Regulatory@perfectionplus.com

 Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands

 Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com

