

Väliaikainen hampaan täytemateriaali

Käyttöohjeet

TÄRKEÄÄ

Tämä käyttöohje on luettava ennen tuotteen käsittelyä.

KOOSTUMUS ON KEHITETTY ERITYISESTI HAMMASLÄÄKETIETEELLISEEN KÄYTTÖÖN.

TUNNISTETIEDOT

Käyttövalmis väliaikainen täytemateriaali synteettisellä resiniipohjalla. Riittävä lujuus, mutta helposti irrotettavissa. Hyvä sidoslujus dentiiniin ja erinomainen marginaalinen adaptaatio. Hyvä tiivistys ominaisuus, helppokäyttöinen koostumus. Tuote ei ole pysyvä täytemateriaali, ja sen suositeltu enimmäiskäyttöaika on vain 4 viikkoa.

Kauppanimi	Temporary Cavity Filling Material (Väliaikainen hammaskaviteetin täytemateriaali, TCFM)
Yhtiön nimi	Perfection Plus Ltd
Yhtiön osoite	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Yhdistynyt kuningaskunta
Yhtiön puhelinnumero	+44 (0) 2380 866 677

TUOTEKODI -

REF

PP010/0006 - 8 g tuubi

PP010/0009 - 30 g purkki

KÄYTTÖAIHEET:

Hammaskaviteettien väliaikaiseen täyttöön. Inlay-hionnan väliaikaisena täytteenä. Väliaikaisena täytteenä juurihoidoissa.

KÄYTTÖOHJE

Aseta sopivan instrumentin avulla suoraan hammaskoloon ja muotoile tarvittaessa. Hampaankoloa ei välttämättä tarvitse kuivata ennen asettamista. Väliaikainen täytemateriaali kovettuu kosteuden imeytyessä siihen, jolloin saadaan läpäisemätön tiiviste. On suositeltavaa, että purentapainetta ei kohdisteta seuraavan noin 2 tunnin aikana.

Väliaikaista nastakruunujen kiinnittämistä varten levitetään kerros kruunun sisäpuolelle ja kiinnitetään normaalilla tavalla.

HUOMIO: Tuubia käytettäessä, irrota korkki, käännä ja lävistä kalvo kokonaan..


VAROITUS

Käyttäjiä, joiden tiedetään olevan allergisia tämän tyyppiselle materiaalille, ei saa altistaa sille. Kosteusherkkyiden vuoksi tuubi tai purkki on suljettava välittömästi materiaalin poistamisen jälkeen, muuten materiaalin viskositeetti kasvaa (kosteuden vaikutuksesta) ja materiaalia ei saa enää ulos tuubista tai purkista.



SÄILYTYS

Säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa (5 – 25 °C). On tärkeää, että putkilon tulpat suljetaan huolella käytön jälkeen.

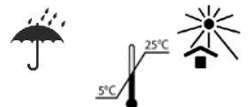

Eränumero/Viimeinen käyttöpäivämäärä

Eränumero ilmoittaa valmistuspäivän muodossa kuukausi - vuosi - päivä numeerisella jälkiliitteellä materiaalierän yksilöimiseksi.

Tämä eränumero on ilmoitettava kaikessa kirjeenvaihdossa. Viimeinen käyttöajankohta näkyy muodossa vuosi - kuukausi.

Tuotetta ei saa käyttää tämän ajankohdan jälkeen.

Varoitus



Jos tuotteen käyttöön liittyy vakava vaaratilanne, siitä tulee ilmoittaa valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, Yhdistynyt
kuningaskunta
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Irlanti,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

